

Mluvící váha Phoenix TBF 440 (anglická)

Návod k obsluze

Funkce

Zprostředkovává údaje o tělesné hmotnosti a poměru tuku v těle pomocí hlasového výstupu.

Technické údaje


Maximální kapacita: 200 kg / 440 lb

Přesnost na: 100 g

Odchylka: $\pm 1\%$

Optimální provozní teplota: 10 °C – 40 °C

Paměť pro osobní data: 10 nastavení

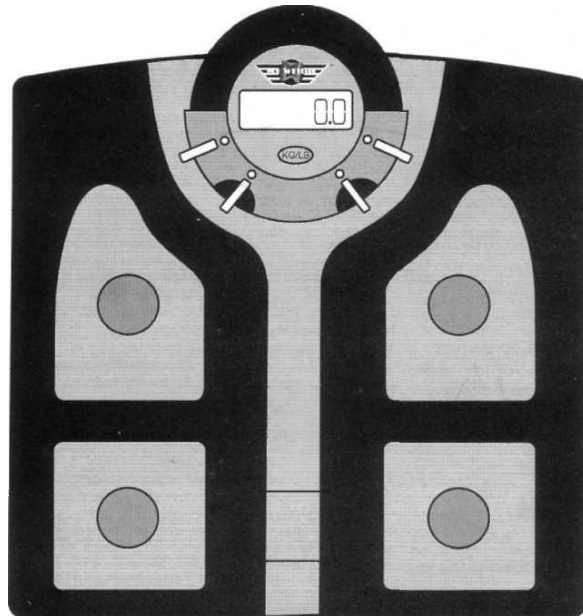

Návod k obsluze

Vkládání baterií

Na příslušné místo vložte 4 AAA baterie.

Nastavování osobních dat

Abyste zvýšili přesnost měření poměru tělesného tuku, musíte zadat svá osobní data. Tato data včetně pohlaví, výšky a věku lze uložit do paměti přístroje, která pojme až 10 osob. Uložená data zůstanou v paměti, dokud je znovu nepřenastavíte.

1. Stiskněte tlačítko **POWER** pro zapnutí přístroje. Přivítá Vás pozdravem „Hello“. Až se na displeji zobrazí „0,0 lb“, oznámí váha svou připravenost pomocí hlášky „I’m ready“.
2. Stiskněte tlačítko **SET**. Na displeji se objeví číslo paměti „01“. Použijte **ŠIPKU DOPRAVA** (vzestupně) nebo **DOLEVA** (sestupně) pro výběr čísla paměti. Poté stiskněte tlačítko **SET**.
3. Pomocí **ŠIPKY DOPRAVA** nastavte své pohlaví. Na levé straně displeje se zobrazí příslušná ikona. Stiskněte tlačítko **SET**.
4. Po zobrazení hodnoty s výškou, opět pomocí **ŠIPEK** nastavte svou tělesnou výšku (pro nastavení jednotky „cm“ viz dále).
5. Stiskněte **SET**.
6. Na displeji se objeví hodnota s věkem (30). Pomocí **ŠIPEK** nastavte svůj věk (rozpětí je 10 až 100 let) a stiskněte **SET**.
7. Na displeji se opět zobrazí Vámi zvolené číslo paměti, což znamená, že nastavování bylo dokončeno.

Pro zadání osobních dat do dalších čísel paměti navolte pomocí **ŠIPEK** požadované číslo a postupujte stejně jako ve výše popsaných krocích.

Pro zahájení měření s použitím paměti stiskněte tlačítko **SET** a postupujte podle kroků 2 až 4 uvedených v následující pasáži.

Pro vypnutí váhy jednoduše stiskněte tlačítko **POWER**.

Vážení a měření

1. Stiskněte a držte tlačítko **POWER**. Přístroj se zapne a přivítá Vás pozdravem „Hello“. Po třech sekundách se na displeji začnou objevovat v jednosekundových intervalech čísla paměti 01 až 10. Uvolněte tlačítko **POWER**, jakmile se objeví Vámi požadované číslo.
2. Na displeji se objeví Vaše výška a pohlaví. Po cca 2 sekundách ukáže displej „0,0 lb“ a ozve se „I’m ready“.
3. Vstupte bosýma nohama na svrchní plochu váhy. Ukáže se Vaše hmotnost a bude přečtena hlasem. Poté se na displeji objeví čtyři kostičky a začne automatické počítání. Jakmile kostičky zmizí, objeví se poměr Vašeho tělesného tuku a přístroj jej oznámí. Měření jsou tím dokončena.
4. Sestupte z váhy. Na displeji se třikrát střídavě ukážou hodnoty hmotnosti a poměru tělesného tuku. Poté se s Vámi přístroj rozloučí pozdravem „Good-bye“ a automaticky se vypne.

Pouze vážení

1. Stiskněte tlačítko **POWER**. Přístroj Vás přivítá pozdravem „Hello“.
2. Jakmile se na displeji objeví „0,0 lb“, oznámí váha „I’m ready“ a Vy na ni můžete vstoupit. Vaše hmotnost se zobrazí na displeji a bude přečtena hlasem.

Volba měrných jednotek

Jakmile je na displeji zobrazeno „0,0 lb“, stiskněte tlačítko **KG/LB**, čímž přepnete měrné jednotky na kilogramy a centimetry. Stejným postupem byste je opět vrátili na libry a palce.

Vypnutí

Pro vypnutí přístroje stačí stisknout tlačítko **POWER**. Váha se jinak vypíná automaticky sama, jakmile nezaznamená žádnou aktivitu po dobu cca 10 sekund.

Zapnutí/Vypnutí hlasového výstupu

Na spodní straně přístroje se nachází vypínač, pomocí něhož můžete zapnout nebo vypnout funkci mluvení.

Důležitá upozornění

- Vstupujte na váhu bosí a dbejte na to, aby Vaše prsty a paty byly správně srovnány s příslušnými elektrodami na povrchu přístroje.
- Pokud při měření dojde k chybě a hodnota poměru tělesného tuku překročí povolený rozsah, objeví se na displeji „Err“ a přístroj se automaticky vypne.
- Při překročení povolené maximální hmotnosti zobrazí displej „FFFF“.
- Při nízkém stavu baterií se na displeji objeví varovný symbol. Vyměňte v takovém případě baterie za nové.
- Používejte přístroj pouze na tvrdých, rovných a pevných podkladech.
- Neumísťujte přístroj na místech s vysokou teplotou či vlhkostí. K čištění používejte vlhkého hadříku a jemných čistidel.
- Vyhněte se nepřiměřeným nárazům nebo vibracím.
- Nebudete-li přístroj používat po delší dobu, vyjměte baterie.
- Nerozebírejte přístroj sami, přijdete tím o svou záruku.
- Přístroj je určen pouze pro domácí a osobní potřebu.

Varování

Přístroj není určen pro ty, kteří používají některé z následujících zařízení:

- kardiostimulátor,
- elektrokardiograf,
- jiné lékařské přístroje implantované do těla nebo používané jako podpůrná zařízení.